

Bella



MaxMedical

Bella

è una poltrona manuale facile da aprire e da chiudere. Tra i suoi punti di forza ci sono: la sua struttura ergonomica, la compattezza delle sue misure e il meccanismo poggia piedi che si apre agevolmente spingendo la schiera sullo schienale della poltrona e facendo leva sui braccioli. Per chiuderla basta spingere le gambe sul poggia piedi e portare la schiena in avanti.





POSIZIONE RELAX



POSIZIONE CHIUSA



POGGIA GAMBE

La **meccanica** permette di alzare prima il poggia gambe e, in un secondo momento, di reclinare lo schienale. Quest'ultimo è bilanciato con lo scarico del peso sul meccanismo così che la persona possa inclinare la schiena mantenendone la posizione voluta con estrema facilità. È possibile quindi assumere la postura di lettura e televisione o di rilassamento e digestione. L'imbottitura dello schienale è sagomata per seguire le curve fisiologiche della schiena ed è realizzata con poliuretano espanso indeformabile con densità variabile per un corretto sostegno della colonna vertebrale. Lo schienale è asportabile per facilitare l'imballaggio, lo stoccaggio e il trasporto della poltrona. Il poggia gambe ha una notevole escursione in avanti per garantire un corretto appoggio degli arti inferiori ed è indicato anche per le persone alte. La poltrona Trudy non è sfoderabile ed è quindi consigliabile l'acquisto dei set di

rivestimento e protezione specifici per la protezione dei braccioli e dello schienale qualora si utilizzino materiali di rivestimento non lavabili.

Le **dimensioni** della poltrona sono small, la larghezza è di circa 70 cm, misura che permette di trasferire la poltrona da una stanza all'altra considerando che la larghezza normale delle porte è di 80 cm. L'estensione del poggia piedi è notevole così da poter accogliere anche persone abbastanza alte. I braccioli sono alti e contenitivi per garantire un comfort e una protezione estrema. Il meccanismo della poltrona è manuale con apertura del poggia piedi e dello schienale indipendenti. È importante sapere che, per qualsiasi specifica richiesta dei clienti, è possibile contattare la ditta.

LARGHEZZA SEDUTA

53 cm

-

ALTEZZA SEDUTA

46 cm

-

PROFONDITÀ SEDUTA

46 cm

PESO SENZA CARRELLO

- kg

-

PESO CON CARRELLO

- kg


POSIZIONE CHIUSA L x H x P

70x105x78 cm

-

POSIZIONE APERTA L x P

70x170 cm

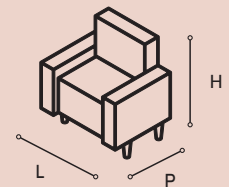

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. La portata della poltrona è di 110 kg.
2. Lo schienale è estraibile per facilitare le operazioni di stoccaggio, trasporto e consegna.
3. La poltrona viene montata su piedi in legno, a richiesta è possibile applicare ruote piroettanti con freno per agevolarne eventuali spostamenti.