

MaxMedical



max-super relax

www.maxmedicacontract.it

Max-Super Relax

è una poltrona relax contemporanea che presenta uno speciale schienale definito da un importante supporto lombare progettato per adattarsi alle curve fisiologiche della schiena mantenendo una spinta ergonomica e dinamica. Lo schienale e la seduta con imbottitura differenziata fanno di Julie un prodotto pensato per coloro che, nelle poltrone relax, cercano un supporto lombare molto sostenuto che mantenga le curve fisiologiche nella loro corretta posizione e che assicuri un elevato confort posturale anche dopo molte ore di utilizzo.






POSIZIONE RELAX



MOVIMENTO ALZAPERSONA

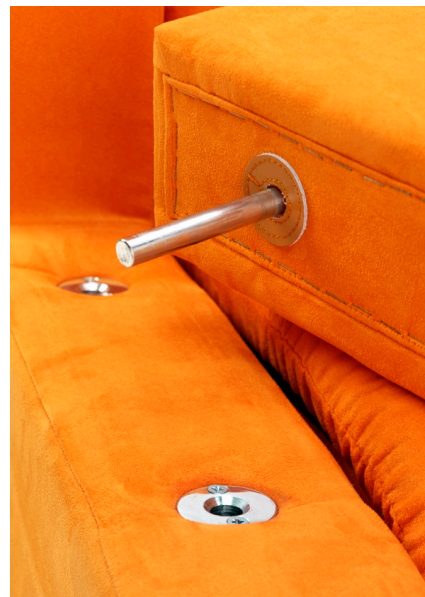

BRACCIOLI ESTRAIBILI

Le **dimensioni** della poltrona sono standard, la larghezza è di circa 50 cm, misura che permette di trasferire la poltrona da una stanza all'altra considerando che la larghezza normale delle porte è di 80 cm.

Il **meccanismo della poltrona** è **alzapersona a due motori**, il che rende il movimento dello schienale indipendente da

quello del relax e del sollevamento, permettendo di scegliere un'infinita possibilità di posizionamenti della poltrona a seconda dei vari utilizzi e delle esigenze dell'utilizzatore finale.

LARGHEZZA SEDUTA
50 cm

-

ALTEZZA SEDUTA
48 cm

-

PROFONDITÀ SEDUTA
48 cm

PESO SENZA CARRELLO
54 kg


-

PESO CON CARRELLO
57 kg

POSIZIONE CHIUSA L x H x P
75x108x80 cm

-

POSIZIONE APERTA L x P
75X155 cm

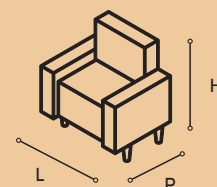

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. La portata della poltrona è di 110 kg.
2. Lo schienale è estraibile per facilitare le operazioni di stoccaggio, trasporto e consegna.
3. Copri braccioli con tasche porta oggetti e copri testa inclusi.
4. Opzione su richiesta: kit batteria al litio per beneficiare di tutto il comfort della poltrona anche lontano da prese di corrente.
5. Opzione su richiesta: è applicabile il carrellino con ruote per lo spostamento della poltrona, azionabile tramite unico comando.
6. L'alimentatore ha la presa di corrente a parete, così da poter essere posizionato distante dalla poltrona evitando rischi elettrici e influenze dei campi elettromagnetici generati dallo stesso. L'alimentatore su richiesta ha la possibilità di essere collegato alla rete elettrica anche tramite cavo in sostituzione della presa a parete per far fronte ad esigenze particolari.

ACCESSIBILITÀ AGEVOLATA

Su richiesta è possibile dotare la poltrona di braccioli estraibili (ambo i lati) per consentire un facile e comodo trasferimento laterale della persona da sedi/carrozzella alla poltrona.